


### **Серия HM 1E от Romaco Siebler**

Машины серии HM 1E специально разработаны для упаковки хрупких шипучих таблеток – очень чувствительного продукта, требующего аккуратного обращения и максимальной защиты от воздействия влаги. Параметры запайки, т.е. комбинация значений температуры, давления и скорости, задаются предварительно и сохраняются в памяти машины для каждого продукта. Дополнительным преимуществом является наличие новой системы запайки с быстросъемными модульными форматными частями, что позволяет производить стрипы разных размеров на одной машине.

#### **Преимущества**

- Высокая доступность
- Быстрый запуск производства
- Высочайшее качество запайки
- Воспроизводимость производственных параметров
- Быстрый доступ ко всем рабочим зонам

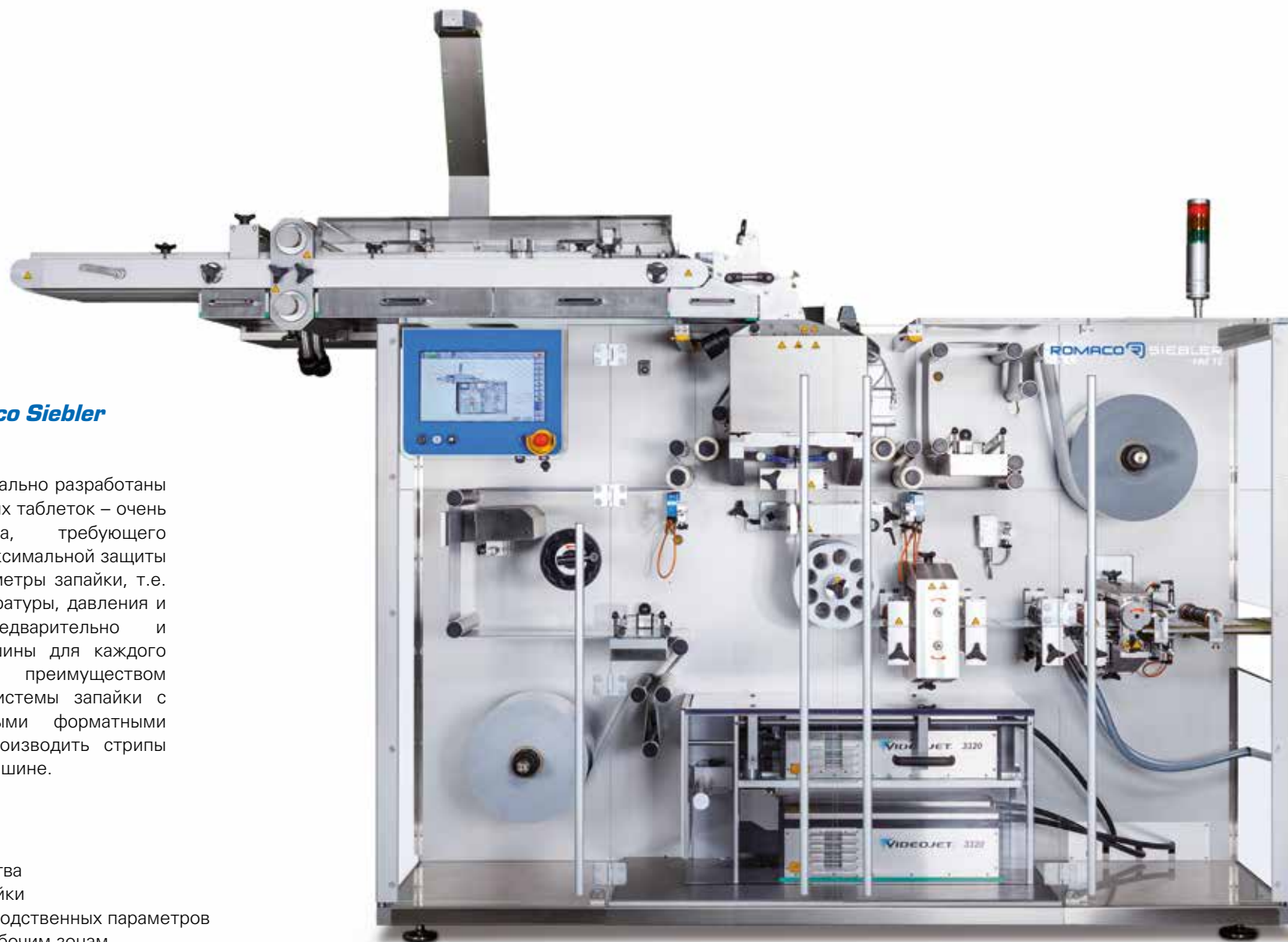

<b>Технические данные</b>	HM 1E-240	HM 1E-350	HM 1E-600
Макс. ширина фольги, мм	240	350	600
Макс. число дорожек	4	6	12
Макс. производительность, таблеток/мин	1,200	1,600	3,300
Вес (прибл.), кг	2,500	2,500	3,500
Электропитание	3 x 400 В, Н, Заземление, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность (кВт)	20	20	30
Давление воздуха, бар	6 – 8		
Расход воздуха, нл/мин	200	200	250

