

S 710 Prime

*Die Hochleistungs-Doppelrundläuferpresse
Made in Germany*

- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Ein- und Zweischiichtabletten
- Bewährte Kilian Qualität





Technische Daten	S 710 Prime				
Maschinenkonfiguration	Mono-layer; Bi-layer				
Stempelzahl	85	77	63	51	51
Werkzeugtyp* (EU und TSM)	B	B	B	D	KILIAN 28/41
Matrizentyp	BBS	BB	B	D	D
Max. Tablettendurchmesser (mm)	11	13	16	25	27
Max. Leistung (Tabletten/Stunde) Einschicht**	1.020.000	924.000	753.000	550.000	550.000
Max. Leistung (Tabletten/Stunde) Zweischicht**	510.000	462.000	376.500	275.000	275.000
Max. Matrizenfüllung (mm)	18			20	
Max. Vordruckkraft (kN)	100***				
Max. Hauptdruckkraft (kN)	100***				
Maximale Anschlussleistung (kW)	28,3				
Standardspannung (V), Frequenz (Hz)	400, 50/60				
Druckluft (bar)	6				
Gewicht (kg)	5.400				
Maße L x B x H (mm) geschlossen	1430 x 1230 x 2072				
Maße L x B x H (mm) offen	2418 x 2618 x 2072				

* Spezielle Werkzeuge/Formate auf Anfrage

** Die Leistung ist abhängig von der Tablettengröße und dem Pressmaterial

*** ist abhängig vom Tablettendesign

Technische Änderungen vorbehalten

Applikationen

Die Romaco Kilian S 710 Prime ist vor allem für hochvolumige Produkte im Pharma- und Non-Pharmabereich, sowohl im Einschicht-, als auch im Zweischichtbereich geeignet.


Welche Applikation möchten Sie verpressen? Unser KiTech freut sich darauf Ihr Produkt zu testen.



Romaco Service

Unser qualifizierter Romaco Service steht Ihnen weltweit zur Verfügung.

Z.B. mit einem Ramp-up-Support, um die vorhandene Produktionskapazität der Anlage frühestmöglich vollumfänglich auszuschöpfen.

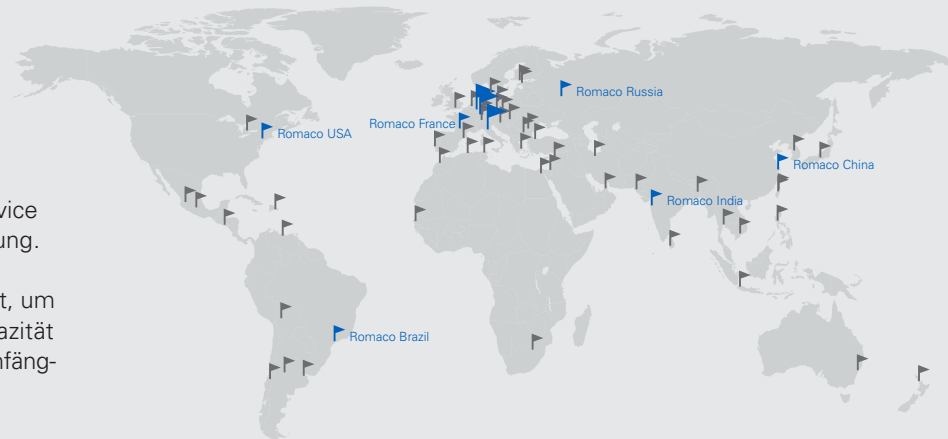

Alternative Produkte:

Die S 370 Prime von Romaco Kilian

Kilians Tablettierlösung, wenn es um mittelgroße Chargen geht. Sie führt die Tradition des Erfolgsmodells KILIAN T 300 fort. Leistung: bis 330.000 Tabletten/Stunde.



Please watch our video!

Romaco Kilian S 710 Prime Tablettenpresse

Die S 710 ist Romaco Kilians leistungsstarke, ökonomische Lösung, bei hoher Ausbringung. Die flexible Tablettenpresse ist durch ihre wechselbare Matrizenscheibe vielseitig einsetzbar. Eine perfekte Kombination von hoher Anlagenverfügbarkeit, Leistung und bewährter Kilian Qualität.



Extrem leistungsstark

- Bis zu 1.020.000 Tab/Std. im Einschichtbetrieb
- Bis zu 510.000 Tab/Std. im Zweischichtbetrieb
- Presskräfte bis 100 kN



Hohe Verfügbarkeit

- Schneller Produktwechsel
- Nur wenige produktberührende Teile
 - Schwenkbarer Tablettenablauf
 - Einfaches werkzeugloses Handling

Schnelles Reinigen

- Hygienesdesign
- Hermetische Trennung zwischen Pressbereich und Technikbereich

Geringe Wartungszeiten

- Langlebige Bauteile wie Longlife Druckrollen
- Remote Assist



Bewährte Kilian Qualität

- Made in Germany
- Gute Zugänglichkeit
- Füllschuh ohne Getriebe, dadurch keine Wärmeentwicklung und leichtes Reinigen
- Patentierte Bremsmagnete, dadurch geringere relative Standardabweichung
- Nur ein Tablettenabstreifer mit zentraler Befestigung für alle Formate
- Produktverlustminimierung durch Produktabstreifer mit Doppelklinge und Magneten
- Selbstoptimierender Regler

